


Dichiarazione Legale

- Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio per garantirne un uso sicuro e corretto. Conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro.
- Tutte le immagini mostrate qui sono solo a scopo illustrativo. Le dimensioni effettive del prodotto possono variare. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni dell'apparecchio.

MANUALE UTENTE

KINGSMITH

Massaggiatore per collo MSK1A

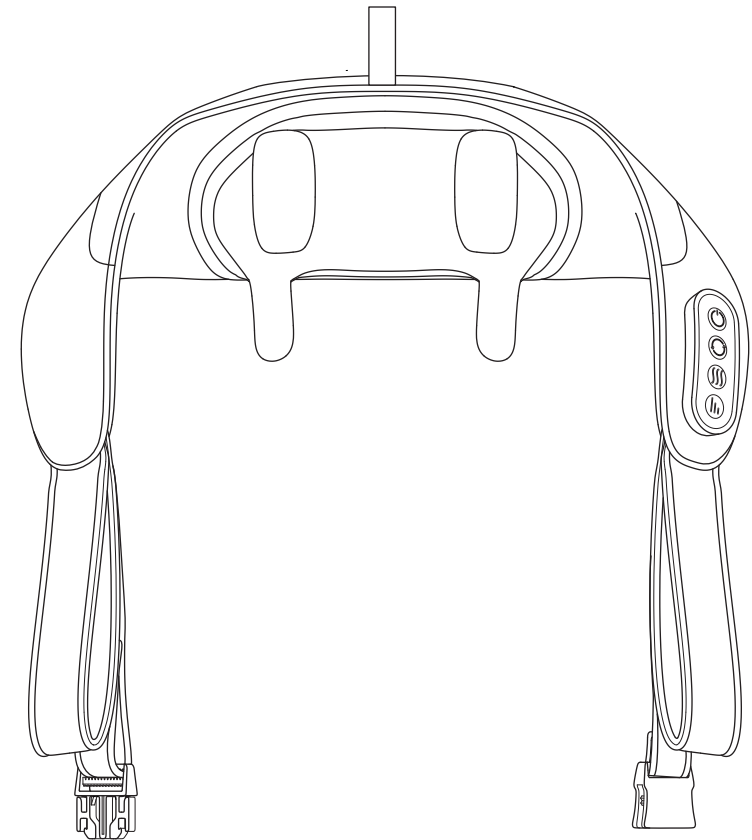

Produttore: Beiing KingSmith Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China
MADE IN CHINA

Grazie per aver acquistato il nostro massaggiatore per il collo. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente il manuale operativo e prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza per utilizzare il prodotto correttamente. Il manuale operativo fornisce all'utente le istruzioni per operare in modo sicuro ed efficace il dispositivo. Dopo la lettura, si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

CONTENUTI

01 Sicurezza	01~02
02 Descrizione del prodotto	03
03 Specifiche del prodotto	04
04 Guida per l'utente	04
05 Manutenzione del prodotto	05
06 Risoluzione dei problemi	05
07 Garanzia	06
08 Protezione dell'ambiente	07~08

ATTENZIONE

Per ridurre i rischi di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni, leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. Non tirare e non stritare intenzionalmente il cavo per evitare danni e pericoli elettrici.
2. Per scollegare il cavo, si prega di tenere l'intera spina di alimentazione.
3. Smettere di usare questo dispositivo quando non funziona o è fuori servizio.
4. Non utilizzare questo dispositivo dopo i pasti, in stato di ebbrezza o dopo esercizi intensi.
5. Tenere questo dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
6. Evitare di infilare mani e piedi in qualsiasi apertura.
7. Non utilizzare questo dispositivo con le mani e i piedi bagnati.
8. Smettere di utilizzare il cavo se è danneggiato, e sostituire il cavo con uno nuovo.
9. Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo se esso provoca sensazioni sgradevoli.
10. Non pulire questo dispositivo con acqua. Se cade nell'acqua, smettere di usare il dispositivo e inviarlo al centro assistenza per ispezione e riparazione.
11. Non tentare di smontare questo dispositivo, potrebbe causare danni personali e materiali se viene riassemblato e modificato.
12. Non utilizzare questo dispositivo in bagno, cucina e in altri luoghi con ambiente ad alta temperatura, alta pressione atmosferica, umidità, fuoco, ecc.
13. Tenere questo dispositivo lontano da spilli e altri oggetti appuntiti. Se danneggiato, si prega di restituirlo al centro assistenza per ispezione e riparazione.
14. Non pulire questo dispositivo durante la ricarica.
15. Si prega di leggere attentamente il manuale utente. Non utilizzare il prodotto continuamente per lunghi periodi al fine di evitare dolori muscolari o danni cutanei causati da massaggi eccessivi.
16. Non utilizzare il prodotto su aree che hanno subito interventi chirurgici o hanno lesioni cutanee, arrossamenti, infiammazioni o congestioni.
17. Questo prodotto è un dispositivo elettronico per la salute ad uso domestico, e non è destinato a scopi diagnostici, terapeutici o commerciali.

PERSONE CON CONDIZIONI MEDICHE PRE-ESISTENTI

Le seguenti persone sono pregate di consultare un medico prima dell'uso:

- Pazienti in trattamento o post-operatori.
- Pazienti affetti da ipertensione, malattie cardiache, arteriosclerosi cerebrale o trombosi cerebrale.
- Pazienti affetti da tumore maligno.
- Donne in gravidanza o durante il ciclo mestruale.
- Pazienti affetti da osteoporosi.
- Persone con pacemaker cardiaco o dispositivi medici impiantabili.
- Pazienti affetti da malattie acute.

PRECAUZIONI

1. Tenere i bambini lontani dal giocare con questo apparecchio, potrebbe causare pericoli per i bambini.
2. Una supervisione ravvicinata è necessaria quando il prodotto è utilizzato da persone invalide, disabili o con qualsiasi forma di capacità fisica, sensoriale o mentale limitata e con esperienza e conoscenza limitate del prodotto (inclusi i bambini).
3. Ci sono componenti che generano calore all'interno, le superfici riscaldate possono causare gravi ustioni alle persone.
4. Non tirare o trascinare il cavo intenzionalmente, né appendere cose ai cavi. Assicurarsi di scollegare tenendo interamente la spina di alimentazione per evitare danni ai cavi.
5. Se il cavo è danneggiato, per evitare pericoli chiedere al produttore o a un'organizzazione / team di manutenzione autorizzata di cambiare il cavo.
6. Non coprire questo apparecchio con coperte durante il funzionamento. Ciò potrebbe causare un aumento della temperatura e provocare malfunzionamenti o danni.
7. Non premere i pulsanti con forza o con le unghie. Tenere l'acqua e le mani bagnate lontano dal pannello e dai pulsanti.
8. Mai lasciare cadere o inserire oggetti in qualsiasi apertura di questo apparecchio.
9. Non utilizzare questo apparecchio un'ora prima o dopo i pasti.
10. Non utilizzare questo apparecchio dopo aver bevuto o in caso di disagio. Smettere immediatamente di usarlo se si avverte qualsiasi disagio.
11. Se la copertura di tessuto risulta danneggiata, restituire questo apparecchio al produttore o a un'istituzione di manutenzione autorizzata per la riparazione.
12. Scollegare sempre questo apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.
13. Smettere di usare questo apparecchio quando non è funzionante, restituirlo al produttore o al reparto di manutenzione autorizzato per la riparazione.
14. Questo prodotto non è destinato all'autodiagnosi o all'autotrattamento.
15. Smettere immediatamente di usare se il calore causa qualsiasi disagio o se la temperatura percepita continua a salire.
16. Questo prodotto non è destinato all'autodiagnosi o al trattamento.
17. Se la temperatura di riscaldamento diventa sgradevolmente alta o continua ad aumentare durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo.

CONDIZIONI AMBIENTALI


1. Non utilizzare questo apparecchio in ambienti eccessivamente polverosi o umidi, come ad esempio un bagno, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti, scosse elettriche o danni alle persone.
2. Non utilizzare questo apparecchio in una stanza con temperatura di 40 gradi o superiore. Non esporre questo apparecchio a termosifoni o fornelli.
3. Non utilizzare questo apparecchio all'aperto o esporlo a lungo alla luce diretta del sole.

02/ Descrizione del Prodotto

• Funzionalità del prodotto

- 1. Massaggio manuale simulato, rilassa profondamente i muscoli delle spalle e del collo, allevia la fatica;
- 2. Tessuto delicato sulla pelle, smontabile e removibile, per un utilizzo più igienico del prodotto;
- 3. Movimento massaggiante silenzioso, simulazione confortevole di un asciugamano caldo;
- 4. Batteria integrata ad alta capacità, per un uso portatile senza fili, lunga durata della batteria.

• Illustrazione del Prodotto e Descrizione

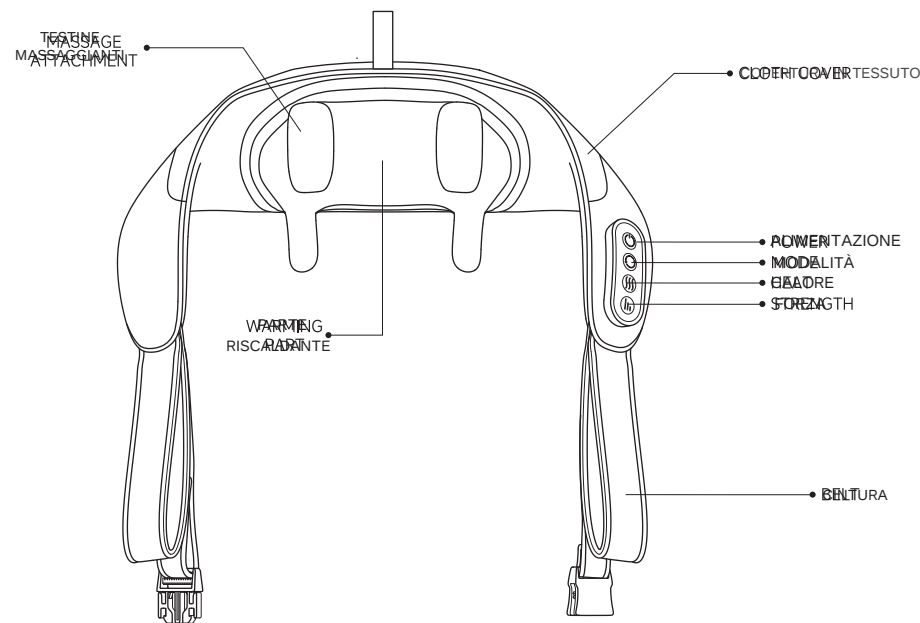

Nota: la disposizione degli interruttori e dei tasti del pannello di controllo dei diversi modelli potrebbe differire a seconda del prodotto effettivamente contenuto nella confezione.

03/ Specifiche del Prodotto

Nome del prodotto	Massaggiatore per collo KingSmith
Modello del prodotto	MSK1A
Tensione nominale	7.4V $\equiv$
Potenza nominale	16W
Ingresso di ricarica	DC5V $\equiv$ 2A

Nota: l'azienda continuerà a migliorare le prestazioni e l'aspetto del prodotto, che sarà soggetto a modifiche senza preavviso.

04/ Guida per l'Utente

Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso iniziale, utilizzare il cavo USB-C in dotazione con un caricabatteria USB 5V/2A per caricare completamente massaggiatore (la luce rossa lampeggia durante la ricarica e diventa una luce bianca fissa dopo che il massaggiatore è completamente carico).

2. Utilizzo del dispositivo

Tasto ON/OFF:

Tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 2 secondi per accendere il massaggiatore. Il tempo di funzionamento predefinito è di 10 minuti, prima che il dispositivo si spenga autonomamente; Tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere il massaggiatore.

Pulsante modalità:

Quando il massaggiatore viene acceso, la modalità predefinita è il massaggio profondo dei tessuti; Premere brevemente il pulsante Modalità per cambiare la modalità di massaggio: massaggio profondo dei tessuti - massaggio rilassante - ripeti in sequenza.

Pulsante calore:

Quando il massaggiatore è acceso, lo stato predefinito è riscaldamento a bassa intensità;

Premere brevemente il pulsante del riscaldatore per cambiare i livelli di riscaldamento:

Bassa intensità - Alta intensità - Spento - Ripeti in sequenza.

3. Posizionare il massaggiatore attorno alla zona del collo sulla schiena e allacciare la fibbia sul retro.

Tenendo la cinghia con entrambe le mani, è possibile accendere e utilizzare il massaggiatore.

4. Dopo essere stato utilizzato per 10 minuti, il massaggiatore può essere riacceso per un ulteriore utilizzo se necessario.

5. La durata media della batteria del massaggiatore è di 1-2 ore a seconda della velocità e della pressione di compressione applicata durante l'uso. Il tempo medio di ricarica è di circa 2,5 ore.

6. La ricarica durante l'utilizzo non è consentita.

7. Caricare completamente il massaggiatore se non viene utilizzato per un lungo periodo.

05/ Manutenzione del Prodotto

1. Conservazione

- Quando non viene utilizzato, riporre il prodotto in una scatola e conservarlo in un luogo sicuro, asciutto, ventilato e fresco.
- Non appendere o tenere il prodotto in sospensione utilizzando il cavo di ricarica.
- Evitare che oggetti appuntiti graffino la superficie del prodotto.
- Non posizionare il prodotto alla luce solare diretta o esporre il prodotto ad alte temperature.

2. Pulizia

- Prima della pulizia, assicurarsi che il prodotto sia spento. Non collegare il cavo di ricarica durante la pulizia.

Nota: non utilizzare detergenti corrosivi come benzene o diluenti per pulire il prodotto.

3. Manutenzione

- Mantenere il prodotto pulito e lontano da luoghi con elevata umidità.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, coprirlo con una copertura antipolvere (da acquistare separatamente) per proteggere il dispositivo dalla polvere.

06/ Risoluzione dei Problemi

- Se si riscontra una qualsiasi delle seguenti situazioni durante l'utilizzo di questo prodotto, fare riferimento alla seguente tabella. Se la situazione anomala continua a verificarsi, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto per prevenire incidenti e contattare immediatamente il servizio clienti. Non smontare o riparare il dispositivo da soli.

Problema	Possibile causa	Consigli
Il prodotto non funziona.	1. Batteria scarica 2. Guasto del prodotto	1. Ricarica per almeno 4 ore 2. Invia il prodotto a riparare
La forza del massaggio è debole.	1. Il livello di forza selezionato. 2. Il dispositivo non è stato indossato correttamente	1. Premere il pulsante di della forza per cambiare livello. 2. Verifica che il dispositivo sia indossato in una posizione ottimale
Il dispositivo ha smesso di funzionare improvvisamente.	1. Batteria scarica 2. La sessione di massaggio (10') è terminata. 3. Protezione dal surriscaldamento per uso prolungato	1. Caricare la batteria 2. Riavviare di nuovo il dispositivo 3. Riavviare il dispositivo dopo che si è raffreddato
La funzione riscaldante non è attiva	La funzione di riscaldamento non è attivata	Premere il pulsante Riscaldamento per attivare la funzione riscaldamento
Rumore di attrito tra la testina massaggiante e i componenti interni o rumore del motore durante il funzionamento,	Sono rumori normali di funzionamento e non indicano un malfunzionamento del prodotto.	Uso normale del prodotto

07/ Garanzia

1. La presente garanzia non è trasferibile.
2. Il periodo di garanzia valido per questo prodotto è di un anno.
3. Dalla data di acquisto, gli utenti possono usufruire della garanzia completa in modo gratuito durante il periodo di garanzia (i danni estetici non rientrano nell'ambito della garanzia).
4. Quando si richiede il servizio di garanzia, mostrare il certificato di acquisto originale e la scheda di garanzia.
5. Fa fede il momento di effettuazione dell'ordine.
6. La presente garanzia non si applica agli utenti di leasing, commercio, commerciali, istituzionali e ad altri utenti residenziali.
7. Le seguenti circostanze non rientrano nell'ambito della garanzia. Per queste circostanze vengono forniti servizi di manutenzione SOLO a pagamento (vengono addebitate le spese di manodopera e di materiale):

- A) Eventuali danni causati da fattori umani, compreso l'uso in ambienti di lavoro anomali, il mancato utilizzo o conservazione secondo le presenti istruzioni e l'uso improprio.
- B) L'utente smonta, ripara o rimonta la macchina da solo oppure persone terze smontano, rimontano o riparano il dispositivo senza l'autorizzazione della Società
- C) Danni causati da un trasporto improprio dopo l'acquisto.
- D) Danni causati da altri fattori di forza maggiore (quali alluvioni, disastri, fulmini, terremoti, ecc.).

08/Protezione dell'Ambiente

Al termine della sua vita utile, non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici generali. Prima di collocare il prodotto nella stazione di riciclaggio designata dalle Autorità, è anche possibile inviare e riportare il prodotto al centro di assistenza post-vendita del produttore. Il personale del centro servizi tratterà il prodotto in modo rispettoso dell'ambiente.

Il nome e la quantità di rifiuti speciali

Nome della parte	Sostanze o elementi che richiedono un trattamento speciale					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Parte esterna	○	○	○	○	○	⊗
Scheda elettronica	X	○	○	○	○	○
Parti in metallo	X	○	○	○	○	○
Parti in gomma	○	○	○	○	○	○
Alimentazione	X	○	○	○	○	⊗
Questo modulo è stato preparato in conformità con lo standard SJ/T 11364 ◆ I componenti della scheda circuito comprendono gli elementi che costituiscono la macchina a scheda circuito, quali resistori, condensatori, circuiti integrati, connettori, e altri simili. ○ Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore ai limiti specificati in conformità alla normativa GB/T 26572. X Indica che almeno uno dei materiali omogenei della parte supera i limiti richiesti specificati nella normativa GB/T 26572 per la presenza della sostanza pericolosa.						

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli coinvolti. Tuttavia, i bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione conformemente a quanto indicato sul dispositivo.

Poiché l'apparecchio è dotato di una superficie riscaldata, le persone insensibili al calore devono prestare attenzione durante l'utilizzo.



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è consigliabile riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta specifico o di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Egli potrà smaltire questo prodotto in modo sicuro per l'ambiente attraverso il riciclaggio.

Descrizione delle etichette ambientali

I prodotti elettronici ed elettrici possono essere utilizzati per un massimo di 10 anni nelle condizioni descritte nel manuale di istruzioni, senza perdita di sostanze nocive o dannose, evitando l'inquinamento ambientale o gravi danni alla vita umana e materiale.



Il numero riportato su questa etichetta indica che il periodo di servizio ambientale del prodotto, nelle normali condizioni di utilizzo, è di 10 anni. Alcune parti potrebbero anche presentare etichette Green Life, dove la durata della vita verde sarà determinata dal numero riportato su tali etichette.

Una proposta per la tutela dell'ambiente

Caro Utente

Ciao!

La Terra è la nostra casa comune, nonché la nostra unica dimora; la salvaguardia della salute è il nostro obiettivo comune. Per garantire una crescita sana per te e la tua famiglia, uniamoci per preservare il nostro ambiente, il nostro unico spazio vitale!

La nostra politica ambientale:

1. Rispettare pienamente le leggi e i regolamenti ambientali.
2. Promuovere attivamente la riduzione delle risorse, dell'energia e dei rifiuti in tutte le nostre operazioni.
3. Ridurre progressivamente l'inquinamento ambientale esistente e contribuire al miglioramento del nostro ecosistema circostante.
4. Integrare la tutela dell'ambiente nello sviluppo delle nostre attività aziendali.
5. Incoraggiare i nostri dipendenti a perseguire ulteriori miglioramenti ambientali e ad adottare comportamenti positivi.

Insieme, possiamo fare la differenza per un futuro sostenibile!

Si prega di gestire l'imballaggio dei nostri prodotti in base ai seguenti requisiti

No.	Componenti	Forma	Può essere riciclato	Modalità per lo smaltimento
1	Cartone esterno			
2	Polistirolo			
3	Sacchetto di imballaggio in plastica	Solida	Sì	Secondo le norme locali
4	Borsa di imballaggio			
5	Pluriball			